



**F.52 & 56N PARALELA GRADUABLE CON MONORRAÍL  
(PARALLEL BARS WITH FOOT PLACEMENT LADDER)**

Última revision 13/04/2013

# **PARALELAS CON MONORRAIL - F.52**

# **PARALELAS CON MONORRAÍL**

# **INFANTIL- F.56N**

Carro monorraíl provisto de rodamientos a bolas.

Arnés de suspensión para el control y motivación de la marcha en adultos.

Incluye plano separador guía, que dirige y evita la marcha cruzada, este plano puede desmontarse con gran facilidad.

Por su construcción totalmente metálica y la sección del material empleado, estando las placas base lastradas, se ha conseguido una gran estabilidad.

La altura de las bases de suelo se ha reducido al máximo, facilitando el paso a la zona de marcha.

Graduable en altura mediante pasadores que quedan ocultos en las columnas superiores.

Ancho graduable hasta quedar plegadas.

Remates en cromo y poliéster.

F.52 - Longitud 350 cm. F.56N - Longitud 250 cm.

## **RECOMENDACIONES DE USO**

Debe instalarse paralelamente a una de las paredes del gimnasio pero a suficiente distancia como para que el fisioterapeuta pueda moverse mientras camina con el paciente. Se colocará un espejo en la pared en uno o ambos extremos de modo que el enfermo pueda verse y coordinarse deambulando. Las barras deben estar fijadas con solidez al suelo para que no oscilen ni se muevan. Pasada esta fase de deambulación podremos continuar con rampa y escalera.

Siga cuidadosamente todas las instrucciones dadas por su médico, fisio o terapeuta para el uso del producto.

# **PARALLEL BARS WITH MONORAI – F.52**

## **PARALLEL BARS WITH MONORAIL FOR CHILDREN – F.56N**

A high degree of stability is ensured with the metal frame of the apparatus, the material used and a weighted base.

The height of the base off the floor has been reduced to a minimum to allow for easy access.

Height can be adjusted using pins that remain hidden on the upper part of the columns.

Adjustable width (can be folded up).

Equipped with abduction board, for guidance and to prevent feet crossing, easily-collapsible.

Chrome and epoxy finish.

F.52 - Length: 350 cms. F.56N - Length: 250 cms.



Removable suspension system and abduction board.

Ball bearing monorail traveller.

Provided with suspension harness for walking.

### **RECOMMENDATIONS FOR USE**

Must be installed in parallel to the walls of the gym but at enough distance so that the physiotherapist can move while the patient is walking. It will be placed a mirror on the wall in one or both ends so that the patient might see himself and coordinated wandering. Bars must be set solid to the ground so not to move or oscillate. Passed this stage of wandering we can continue with ramp and stairs. Follow carefully all instructions given by your doctor, physiotherapist or therapist for the use of the product.

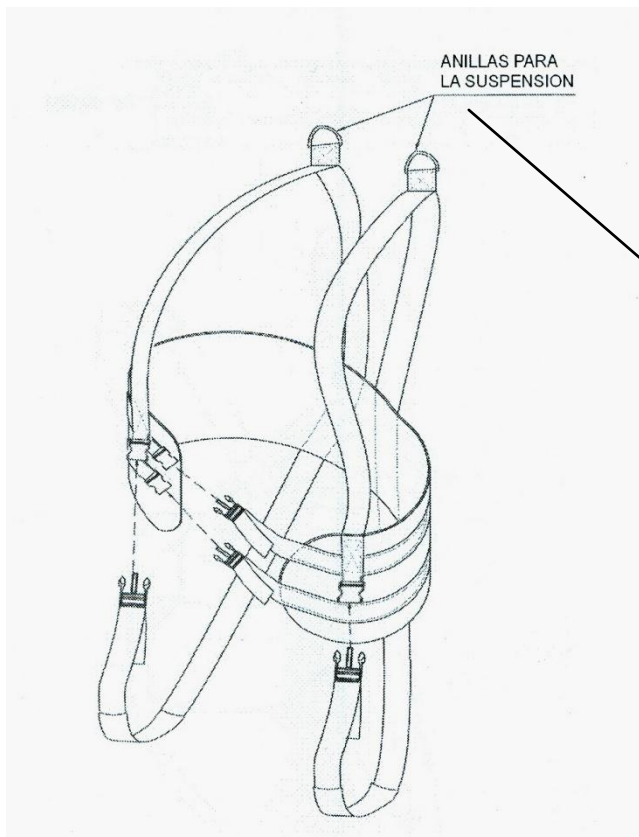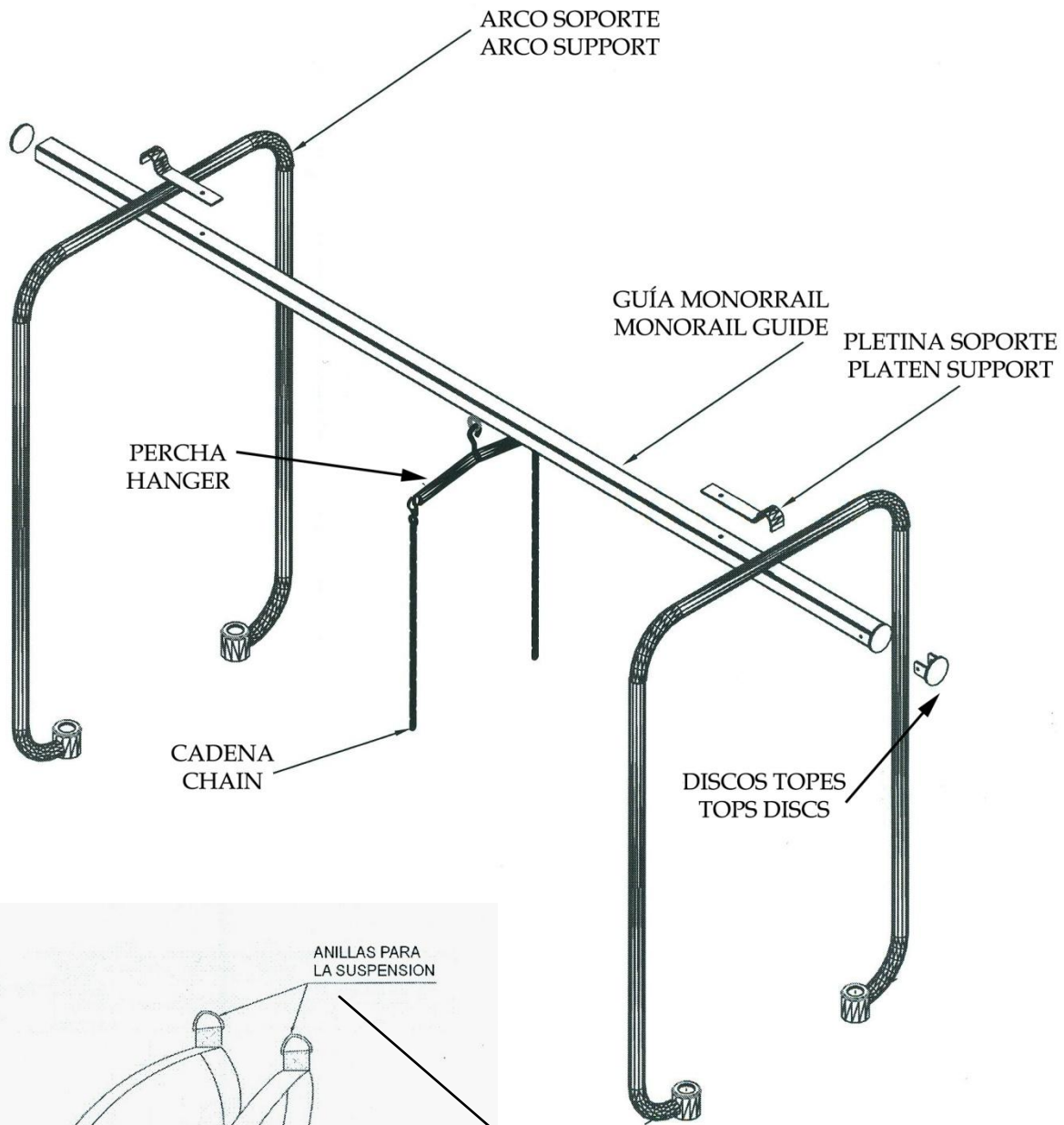

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Montar los arcos sobre los tinteros (quedarán sujetos inmediatamente).
- 2) Alojjar los pasamanos de las paralelas sobre los tinteros a la altura deseada fijando el pasador en el orificio correspondiente a dicha altura.
- 3) Sujetar el monorraíl a los arcos mediante las pletinas soporte y fijar con los tornillos.
- 4) Introducir la percha por un lateral del monorraíl quitando uno de los discos topes y volver a cerrar el monorraíl con los discos topes.
- 5) Suspender el arnés a la percha a la altura deseada.
- 6) Montar el plano separador sobre la base lastrada enroscado con dos tiradores que se acompañan.

## (ASSEMBLY INSTRUCTIONS)

- 1) Mount the arches on the inkwells (it will be subject immediately).
- 2) Put the handrail of the parallel bars on the inkwells to the desired height, setting the pin into the hole corresponding to that height.
- 3) Hold the monorail to the arcs by two screws on each of the two platen support on each side of the monorail.
- 4) Insert the hanger by the monorail by one side of the tops discs and hang the harness.
- 5) The foot placement bar will go on weighted base with two screwed accompanying.

