

STANDING DE POSICIONAMIENTO T.O.175

Permite estar de pie de forma segura, estable e independiente.

El acto de estar de pie ayuda a estirar los músculos y tendones para evitar las contracturas, mejora la circulación, extiende la cavidad abdominal para que los procesos respiratorio y digestivo funcionen con facilidad y ayuda en la evacuación del tracto rectal

Bandeja y tope de cintura pélvica graduable en altura y aproximación.

Graduable en altura. Topes de piernas ajustables.

Reposapiés antideslizantes con cazoletas graduables y correas.

Estructura metálica rematada en cromo y poliéster estando sus componentes almohadillados y tapizados en calidad ignífuga.

Medidas: Ancho 54 cms. Profundidad de 37cms (sin soporte pélvico) a 54 cms.


ACCESORIO OPCIONAL:

JUEGO DE CONTROLADORES DE CADERA GRADUABLES - T.O.175/A



INSTRUCCIONES DE USO


Fabricante: Ortotecsa, s.l. C/Peña de Francia,8 – 28500 Arganda del Rey (Madrid), España.
Tlf.: +34918719132 / Fax: +34918719323 – email: info@ortotecsa.com, www.ortotecsa.com

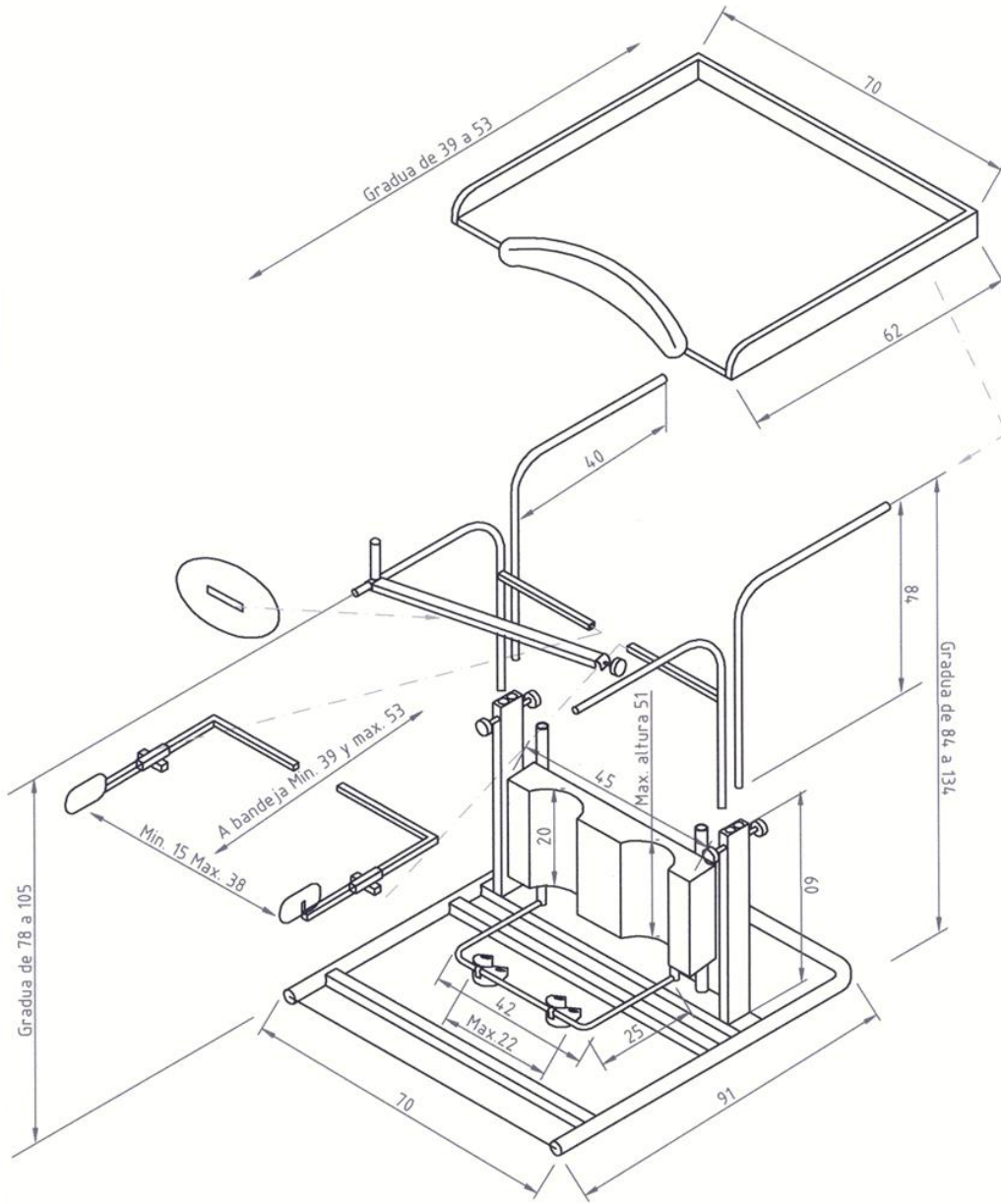


INSTRUCCIONES:

Graduar previamente todos los accesorios del standing a la medida correcta del usuario. (Ver ajustes de accesorios). Una vez realizados los ajustes, ya puede usar el standing.

Acceder al standing abatiendo el tope de cintura pélvica (respaldo) en el sentido que se muestra según la flecha F/A, colocar los pies en las cazoletas y cerrar el tope de cintura pélvica mediante el puño M tal como indica la flecha.

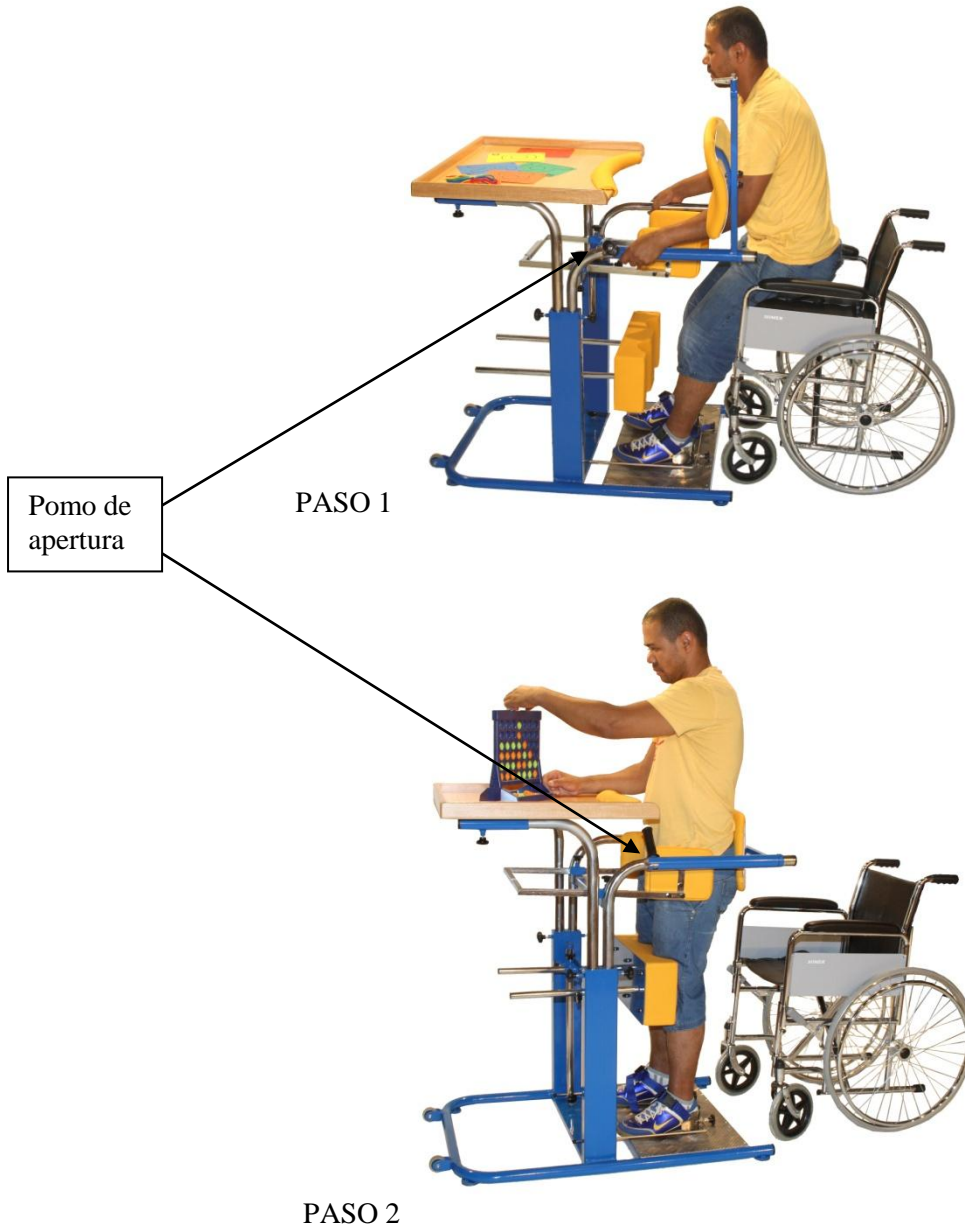

AJUSTES DE ACCESORIOS:

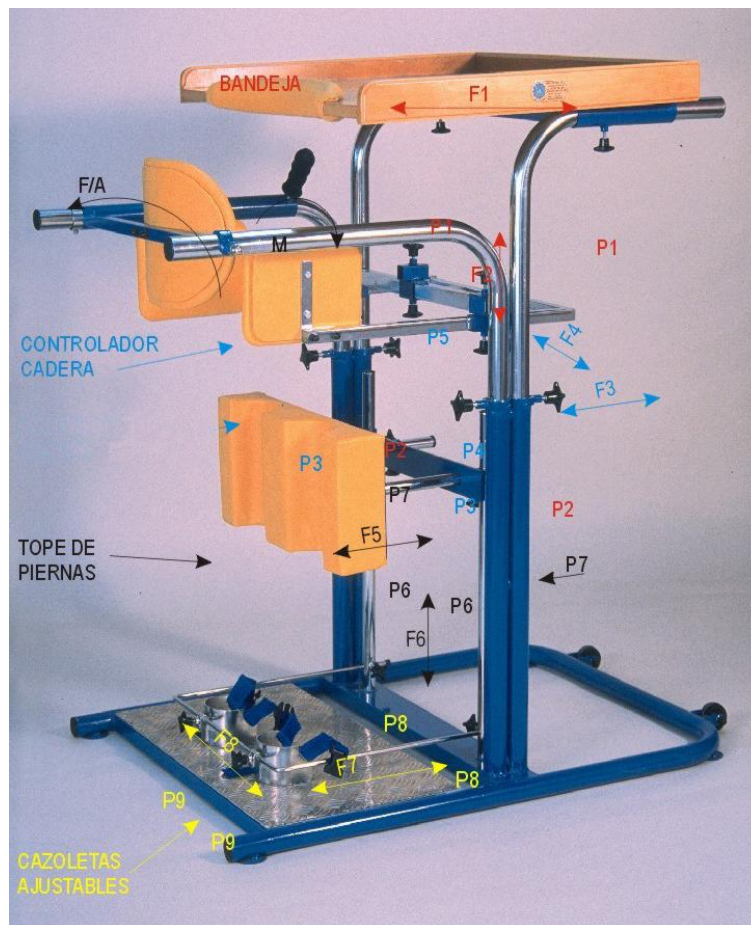

- Graduación bandeja:

Bandeja graduable en altura y aproximación.
 Altura mínima de 85 cms y máxima de 140 cms.
 Aproximación mínima de 39 cms y máxima de 53 cms.

Altura: Aflojar los pomos P2, deslizar en sentido de la flecha F2 hasta la posición deseada. Fijar la bandeja apretando los pomos P2 de nuevo.

Profundidad: Aflojar los pomos P1, deslizar en sentido de la flecha F1 hasta la posición deseada. Fijar la bandeja apretando los pomos P1 de nuevo.

- Graduación controladores de cadera:

Graduable en altura, anchura y aproximación.
 Altura mínima de 70 cms y máxima de 97 cms.
 Anchura mínima de 15 cms y máxima de 38,5 cms.
 Aproximación a bandeja mínima de 39 cms y máxima de 53 cms.

Altura: Aflojar los pomos P3, deslizar en sentido de la flecha F2 hasta la posición deseada. Fijar el controlador apretando los pomos P3 de nuevo.

Profundidad: Aflojar los pomos P4, deslizar en sentido de la flecha F3 hasta la posición deseada. Fijar el controlador apretando los pomos P4 de nuevo.

Anchura: Aflojar los pomos P5, deslizar en sentido de la flecha F4 hasta la posición deseada. Fijar el controlador apretando los pomos P5 de nuevo.

- **Graduación tope de piernas:**

Altura máxima de 51 cms y mínimo de 25 cms.

Altura: Aflojar los pomos P7, deslizar en sentido de la flecha F6 hasta la posición deseada. Fijar el tope apretando los pomos P7 de nuevo.

Profundidad: Aflojar los pomos P6, deslizar en sentido de la flecha F5 hasta la posición deseada. Fijar el tope apretando los pomos P6 de nuevo.

- **Graduación cazoletas de pies:**

Reposapiés deslizante con correas.

Anchura máxima de separación entre cazoletas de 22 cms.

Aproximación máxima de 42 cms.

Profundidad: Aflojar los pomos P8, deslizar en sentido de la flecha F7 hasta la posición deseada. Fijar las cazoletas apretando los pomos P8 de nuevo.

Anchura: Aflojar los pomos P9, deslizar en sentido de la flecha F8 hasta la posición deseada. Fijar las cazoletas apretando los pomos P9 de nuevo.

- **Graduación tope de cintura pélvica (respaldo)**

Graduable en altura. Altura mínima de 78 cms y máxima de 105 cms.



STANDING FRAME – T.O.175

Height-adjustable.

Tray adjustable in height and proximity.

Set of hip stabilisers and pelvic buffer, adjustable leg stop.

Non-slip feet rest with adjustable guard and strap.

Metal frame, with chrome and epoxy finish.

All components cushioned with fireproof upholstery.


Sizes: Width 54 cms. Depth 37cms (without pelvic support) to 54 cms.

OPTIONAL: ADJUSTABLE PELVIC SUPPORT – T.O.175/A



USER INSTRUCTIONS


Manufacturer: Ortotecsa,s.l. C/Peña de Francia,8 – 28500 Arganda del Rey (Madrid), España.
Tlf.: +34918719132 / Fax: +34918719323 – email: info@ortotecsa.com, www.ortotecsa.com

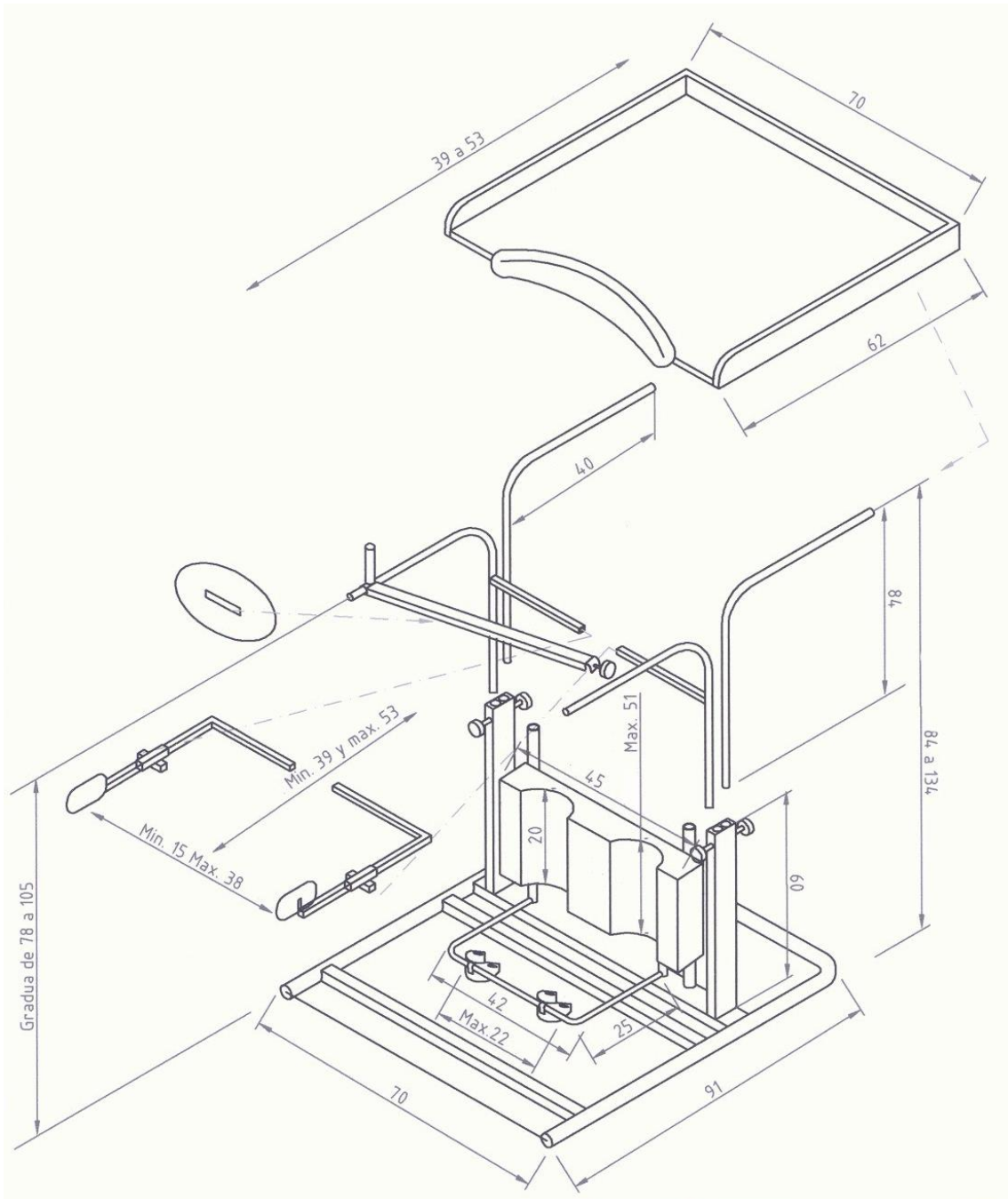


INSTRUCTIONS:

First, it's necessary to adjust all the accessories of the standing to the correct size for the user. (See adjustment accessories). After making adjustments, you can use the standing.

Access: Fold down the backrest in the direction shown by the arrow F / A, place the feet in the cups and close the backrest by fist M as indicated by the arrow.

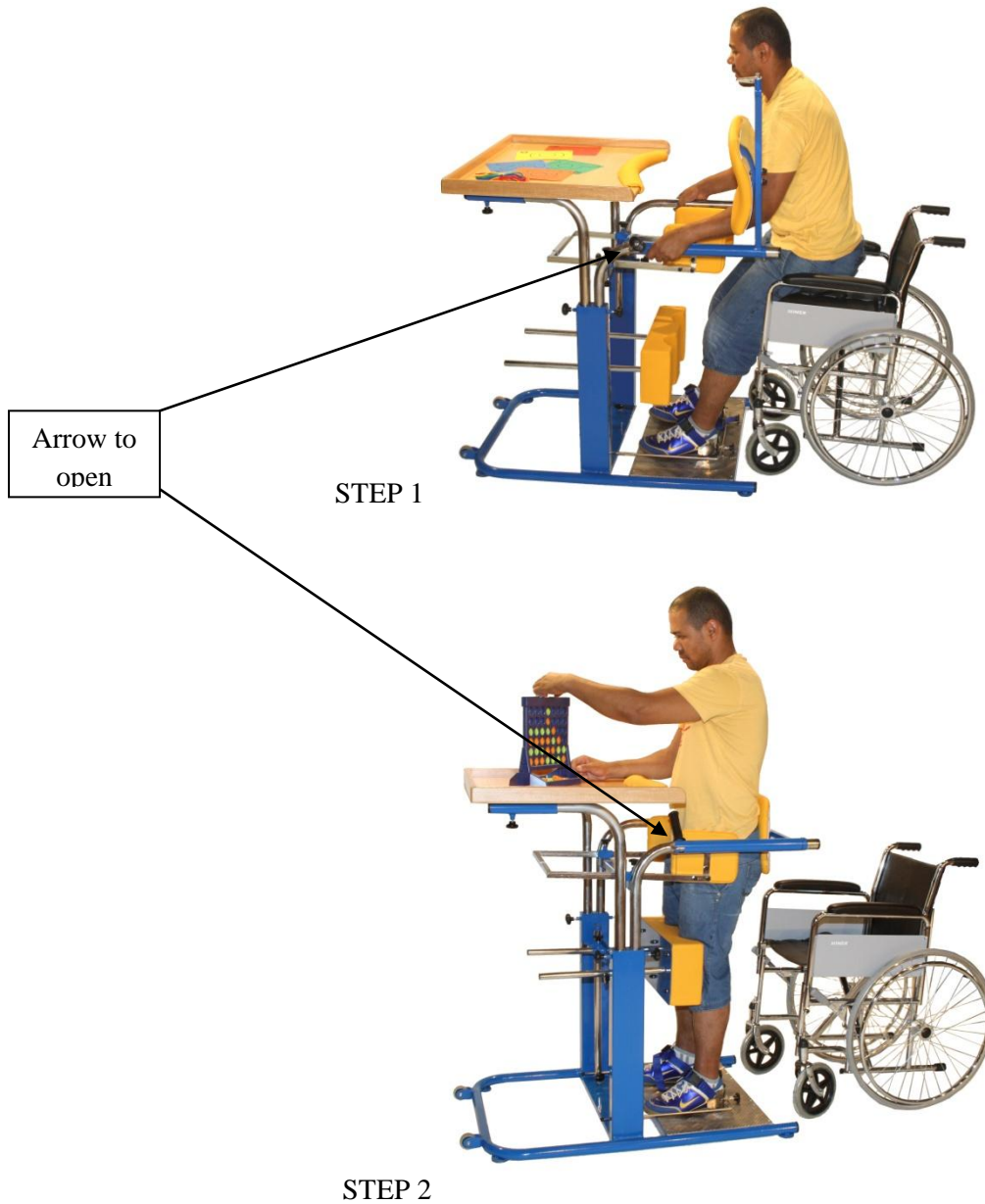

ADJUSTMENT OF ACCESORIES:

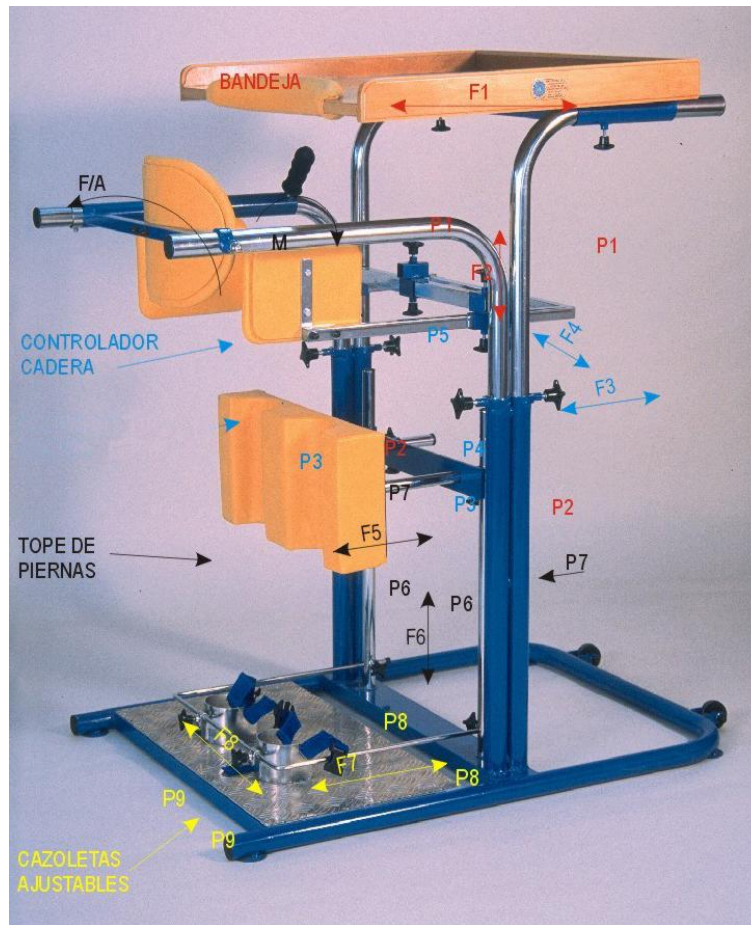

- Adjustment Tray (BANDEJA):

Adjustable height and approach.

Height: minimum 85 cms and maximum 140 cms.

Approach: minimum 39 cm and a maximum of 53 cms.

Height: Loosen pommels P2, slide in the direction of arrow F2 to the desired position. Fix it tightening the P2 pommels again.

Depth: Loosen pommels P1, slide in the direction of arrow F1 to the desired position. Fix it tightening the P1 pommels again.

- Adjustment pelvic support (CONTROLADOR DE CADERA):

Adjustable height, width and approach.

Height: minimum 70 cms and maximum 97 cms.

Width: minimum 15 cm and a maximum of 38,5 cms.

Approach to the tray: minimum 39 cm and a maximum of 53 cms.

Height: Loosen pommels P3, slide in the direction of arrow F2 to the desired position. Fix it tightening the P3 pommels again.

Depth: Loosen pommels P4, slide in the direction of arrow F3 to the desired position. Fix it tightening the P4 pommels again.

Width: Loosen pommels P5, slide in the direction of arrow F4 to the desired position. Fix it tightening the P5 pommels again.

- Adjustment top for legs (TOPE DE PIERNAS):

Height: minimum 25 cms and maximum 51 cms.

Height: Loosen pommels P7, slide in the direction of arrow F6 to the desired position. Fix it tightening the P7 pommels again.

Depth: Loosen pommels P6, slide in the direction of arrow F5 to the desired position. Fix it tightening the P6 pommels again.

- Adjustment cups for feet (CAZOLETAS AJUSTABLES):

Maximum width of separation between cups of 22 cms.

Approach maximum of 42 cms.

Depth: Loosen pommels P8, slide in the direction of arrow F7 to the desired position. Fix it tightening the P8 pommels again.

Width: Loosen pommels P9, slide in the direction of arrow F8 to the desired position. Fix it tightening the P9 pommels again.

- Adjustment backrest:

Height: minimum 78 cms and maximum 105 cms.